



# SU-02


Economic et depourvue table d'operation  
Sans commande electrique

# SU-02

## Economic et depourvue table d'operation Sans commande electrique

Conçu aux procédures dans la gamme de la chirurgie generale, vasculaire, cardiaque, en neurochirurgie, en urologie, gynécologie, proctologie, otorhino-laryngologie, ophtalmologie, endoscopie, coelioscopie, chirurgie traumatologique, oncologie, chirurgie dentaire, esthétique et autres.

L'offre complète de l'équipement spécialisé est présentée dans le catalogue « Équipement des tables d'opérations ».

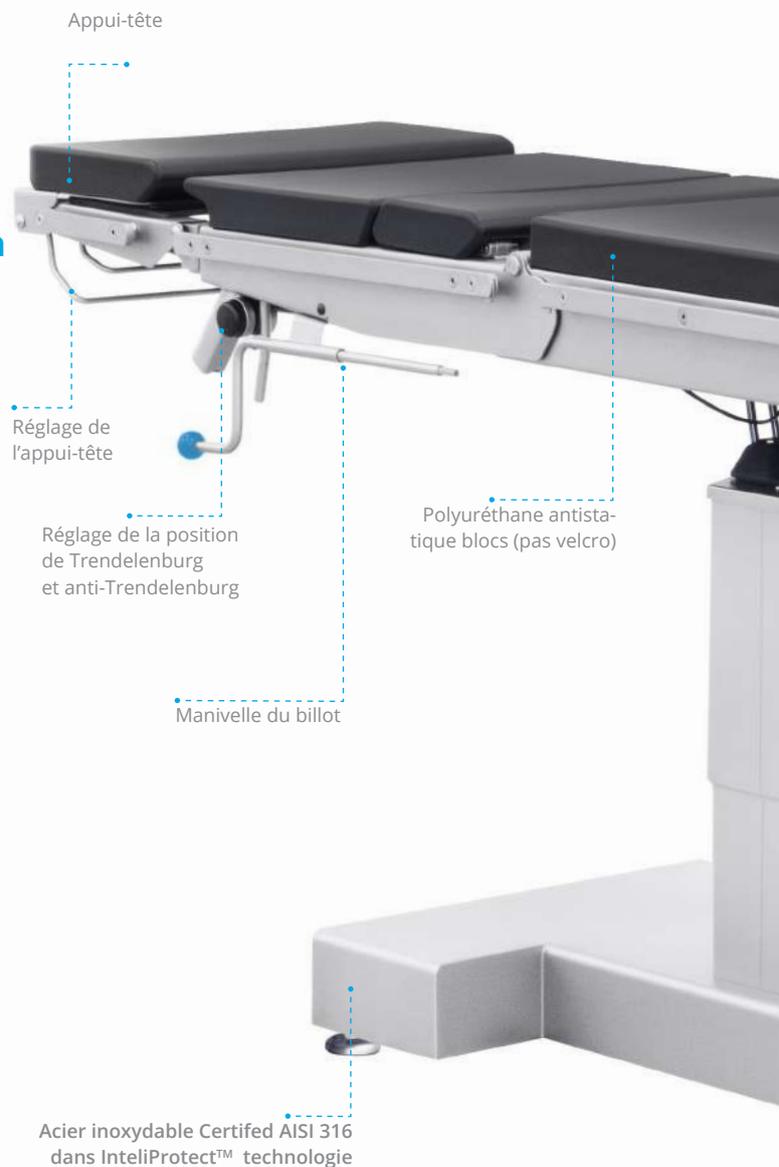

### Construction standard


- La table est en acier inoxydable résistant aux acides.
- Blocus central activé par le levier de pied (fermeture le mécanisme dans T forme la base via quatre escamotables foots; la fermeture du mécanisme dans H forme la base - Su - permobil - via la fermeture centrale de quatre roues, avec roue directionnelle); blocus central activé par le levier de pied (fermeture le mécanisme dans T forme la base via quatre escamotables foots; la fermeture du mécanisme dans H forme la base - Su - permobil - via la fermeture centrale de quatre roues, avec roue directionnelle);
- Les matelas sont amovibles, sans couture, antistatiques, résistants aux désinfectants. Matelas amovible autoclavable a 121°C.
- Le plateau de la table est radio-transparent a meilleure coopération avec C-bras;
- Les segment de la têtère et des jambières sont interchangeables.
- Les surfaces de la table sont faciles à nettoyer et résistants aux désinfectants.
- Une plaque de jambe est disponible.

### Fonctions et motorisations

- Le changement de la hauteur du plateau réalisé grâce au système hydraulique.
- Inclinaisons du dossier, des jambières en cas du plateau à 4 ou 5 segments, positions de Trendelenburg/anti-Trendelenburg, réalisés manuellement, par verin à gaz.
- Le billot ( en cas du plateau à 5 ou 6 segments ), l'inclinaison latérale du plateau réalisés manuellement, par manivelle localisé sur le côté de la table sous le siège segment ou facultativement par un fanatique s'est positionné au patient côté de tête;
- Réglage des jambières en cas du plateau à 6 segments réalisé manuellement, par crémaillères.
- Le plus grand segment est réglable de côté manuellement.



## Position de Trendelenburg et anti-Trendelenburg

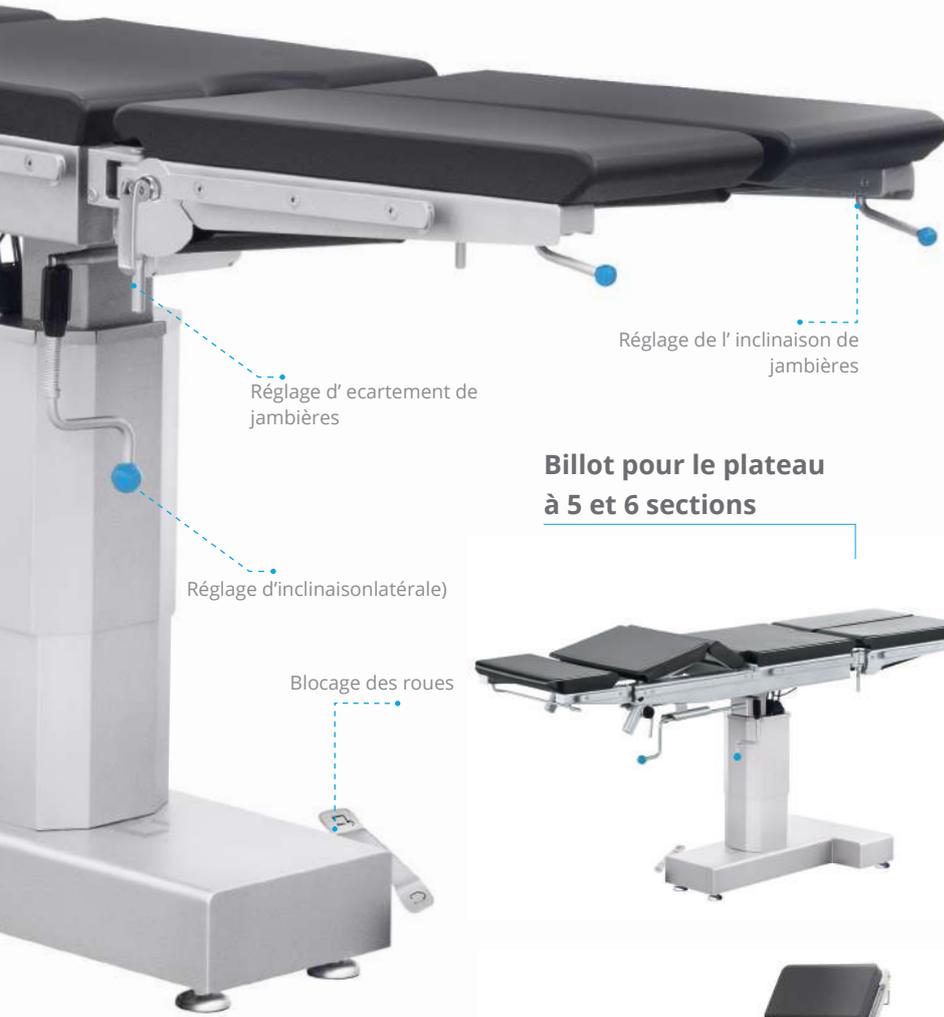

Réglage d' écartement de jambières

Réglage de l' inclinaison de jambières

Réglage d'inclinaison latérale)

Blocage des roues

## Billot pour le plateau à 5 et 6 sections



## Inclinaison latérale



## Position pour les interventions par coelioscopie



Position assise



Extension orthopédique



Position gynécologique assurée par la rallonge gynécologique WS-28.7 et par porte-jambes WS-05.5

# FONCTIONS ET SOLUTIONS STANDARD

## Fonctionnement avec le bras C (radio)

- Les sections de jambe et de tête interchangeable se sont combinées avec la colonne asymétrique le placement fournit le meilleur accès au C-bras pour peropérateur opérationnelle du patient.
- Toutes les sections de haut de table sont radiotransparent.



Plage de radio-transparence avec la tablette pour clichés radio.



## Matelas amovibles



La table est équipée avec les matelas de polyuréthane amovibles, sans coutures, de 50 hauteur de mm. Tous les blocs sont antistatiques, imperméables, transparents pour les Rayons X. Il peuvent facilement enlevés du haut de table en raison des épingles de fix spéciales, qu'aussi garantissent que les blocs restent dans l'endroit pendant le mouvement du tabletop. Les surfaces lisses des matelas sont faciles à nettoyer et désinfecter et sont résistantes aux désinfectants.

Chaque les matelas est fabriqué par Famed et est soumis au contrôle de qualité prudent garantir l'utilisation à long terme et l'utilisation sécuritaire.

Démontage rapide et facile du matelas.

## Option de base



Supermobil avec la base en H avec inclinaisons latérales équipé avec de grandes roues de diamètre 125 mm



Supermobil avec la base H sans inclinaisons latérales équipé avec de grandes roues de diamètre 125 mm



La base mobile en avec 4 de blocage au sol et 3 roues

# OPTIONS DU PLATEAU



## Longueur totale:

- Plateau a 4 segments 2060 mm
- Plateau a 5 segments 2060 mm
- Plateau a 6 segments 2160 mm



Plateau a 4 segments

## Largeur totale:


- Plateau a 4 segments 550 mm
- Plateau a 5 segments 550 mm
- Plateau a 6 segments 550 mm



Plateau a 5 segments

## Longueur du segment de jambières:

- Plateau a 4 segments 615 mm
- Plateau a 5 segments 615 mm
- Plateau a 6 segments 750 mm

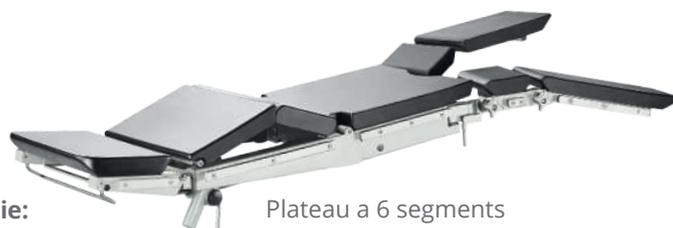

Plateau a 6 segments

## Haut de table de 4 sections avec une plaque jambière en une partie:

- Longueur totale du plateau de table 2060 mm
- Largeur totale du plateau 550 mm
- Longueur de la section de jambe 615 mm



Plateau a 5 segments avec une plaque jambière en une partie

## Interchangeable section la table



Table est équipée de amovibleet sections interchangeables de la tête et des jambes

## ACCESSOIRES



Repos bras PR-01.5



Jambes de Goepel WS-05.5



Calotte de tete WS-21.5



Calotte de tete WS-21.11



Rails latéraux WS-32.5



Table pour chirurgie de la main WS-48.5



Support d'appui epaule WS-59.5



Jambières gynécologiques (Stirrups)



## SU-02




Fonctions de la table par pompe hydraulique



685 a 985 mm (SU-02 avec base en forme de T avec ou sans inclinaisons latérales)  
 705 a 1005 mm (SU-02 avec base en forme de H avec inclinaisons latérales)  
 685 a 985 mm (SU-02 avec base en forme de H sans inclinaisons latérales)



Fonctions de la table activables manuellement

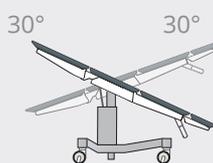

-90° to +25°

-50° to +55°

-90° to +45° \*\*




-40° to +85°

±25°



180°

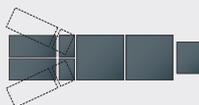

\* sur plateau de table 5 ou 6 segments

\*\*sur plateau de table 6 segments

### InteliProtect™



Cette technologie consiste principalement en l'utilisation d'un nouvel acier inoxydable de meilleure qualité (selon la norme internationale EN 10088) et de l'amélioration du processus d'usinage permettant de réduire le nombre d'impuretés créées à la surface des tables. De plus, la technologie **InteliProtect™** utilise un bain chimique plus riche, qui protège mieux nos produits et les endroits particulièrement sensibles à la saleté et à la corrosion ; nous recouvrons la surface d'une couche protectrice d'un produit à base de zinc.

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>SU-02 avec la base en T</b>	<b>SU-02 avec la base en H</b>	<b>SU-02 avec la base en H, sans inclinaison latérale</b>
Longueur de la table plateau avec 4 sections plateau avec 5 sections	2060 mm	2060 mm	2060 mm
Longueur totale du plateau à 6-segments	2160 mm	2160 mm	2160 mm
Largeur totale du plateau	550 mm	550 mm	550 mm
Largeur x épaisseur des matelas	500 x 50 mm	500 x 50 mm	500 x 50 mm
Reglage de la hauteur du plateau	685 to 985 mm	705 to 1005 mm	685 to 985 mm
Position Trendelenburg	30°	30°	30°
Position anti-Trendelenburg	30°	30°	30°
Translations laterales	±25°	±25°	-
Reglage de segment de dossier	-40° to +85°	-40° to +85°	-40° to +85°
Reglage de l'appui-tête	-50° to +55°	-50° to +55°	-50° to +55°
Réglage du billot (plateau à 5 et 6 segments)	150 mm	150 mm	150 mm
Reglage de l'inclinaison des appui-pieds (plateau à 4 et 5 segments)	-90° to +25°	-90° to +25°	-90° to +25°
Reglage de l'inclinaison des appui-pieds (plateau à 6 segments)	-90° to +45°	-90° to +45°	-90° to +45°
Angle d'écartement des appui-pieds	180°	180°	180°
Charge admissible maximale	250 kg	250 kg	250 kg
Diamètre des roues	-	125 mm	125 mm
Poids de la table	160 kg	105 kg	105 kg