

Système HemoCue® WBC DIFF



Une différence innovatrice pour des soins plus rapides

Avec sa technologie révolutionnaire, le système HemoCue WBC DIFF permet d'obtenir une numération des globules blancs ayant la précision des tests pratiqués en laboratoire de biologie médicale mais également une formule leucocytaire sur le lieu de soin. En cinq minutes seulement, vous obtenez une numération précise des neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles et basophiles.

S'intégrant facilement dans une grande diversité d'applications cliniques et jusque dans les dispensaires les plus reculés, ce système présente des avantages évidents. Une numération WBC DIFF immédiate peut faire toute la différence : agir sur le lieu de soin plutôt que d'attendre, passer de l'examen au traitement en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures ou en quelques jours.

La précision commence avec nous



Pour en savoir plus sur le système HemoCue® WBC DIFF, rendez-vous sur hemocue.com

Des réponses quand vous en avez besoin

- Des résultats aussi fiables qu'en laboratoire en quelques minutes
- Des décisions de traitement plus rapides, un processus plus fluide
- Facile à utiliser par du personnel non laborantin après une courte formation
- Échantillons veineux ou capillaires


Plus de précision pour des décisions plus fiables

- Étalonnage en usine ne nécessitant aucun étalonnage ultérieur
- Logiciel unique pour CQ interne
- Alerte automatique pour cellules non identifiées


Système HemoCue® WBC DIFF

Principe	Système d'imagerie caractérisant les globules blancs colorés, identifiés et comptés	Température de stockage	Analyseur : 4-50 °C (39-122 °F) Microcuvettes : 15-35 °C (59-95 °F), <90% humidité sans condensation, stockage à court terme (quatre semaines, non ouvert) 4-50 °C (39-122 °F), <90% humidité sans condensation, stabilité du flacon ouvert trois mois, emballage unitaire les microcuvettes doivent être utilisées dans les 10 minutes suivant l'ouverture de l'emballage individuel
Paramètres	Leucocytes totaux (globules blancs) et (en valeurs absolues et en %) pour : Neutrophiles Lymphocytes Monocytes Éosinophiles Basophiles	Température de fonctionnement	Échantillons veineux/capillaires dans un tube EDTA : 18-30 °C (64-86 °F). Echantillons capillaires prélevés au bout du doigt : 18-25 °C (67-77 °F).
Étalonnage	Étalonnage en usine : aucun étalonnage ultérieur nécessaire	Alimentation	Adaptateur secteur ou piles
Échantillons	Sang total capillaire ou veineux (EDTA)	Interface	Imprimante, clavier, lecteur de code barres, PC
Plage de mesure	0,3-30,0 × 10 ⁹ /L (300-30000/mm ³ , 300-30000/μL)	Gestion des données	Date, Heure, Identité patient, Identité laboratoire, Identité opérateur, Identité site, Contrôle identité
Temps de mesure	5 minutes	Connectivité	Connexion POCT1-A par Ethernet
Volume de l'échantillon	10 μL	Contrôle qualité	"Auto-test" intégré, logiciel de reconnaissance d'images, alerte pour cellules non identifiées
Dimensions	188 × 157 × 155 mm (7,40 × 6,18 × 6,10 pouces)		
Poids	1 300 g (2,87 livres) piles incluses		


Trois étapes simples

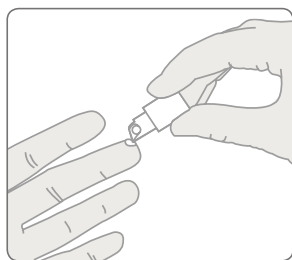

1 Remplir la microcuvette.

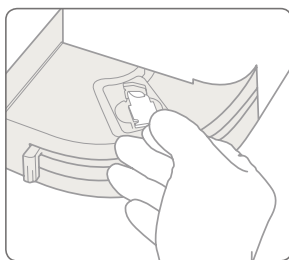

2 Placer la microcuvette dans l'analyseur.

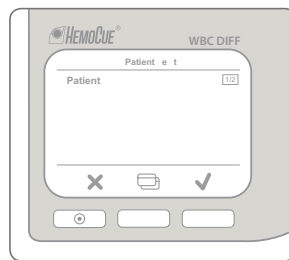

3 Voir les résultats.



Depuis plus de 30 ans, HemoCue est le leader des diagnostics médicaux sur les lieux d'intervention. Notre spécialité : offrir aux professionnels de santé la précision des tests de laboratoires et des résultats comparables à ceux d'un laboratoire de biologie médicale.

